



مخازن طبی آبادیس





مخازن طبی **آبادیس** نامی جدید در صنعت تجهیزات مصرفی پزشکی در ایران می باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۶ با نیروهای کارآمد و نخبه در این صنعت در شهرک صنعتی شمس آباد شروع به فعالیت کرده است. آبادیس تاکنون توانسته است با ثبت اختراع و طرح صنعتی پیشگام در تولید کیسه های ساکشن یکبار مصرف باشد. آبادیس محصولات خود را با کیسه های ساکشن یک بار مصرف در سایزهای مختلف با تمامی متعلقات خود، آغاز کرد و به زودی اخباری را در مورد محصولات دیگرش در حوزه کنترل عفونت بیمارستانی ارائه می دهد.

تمامی تجهیزات این کارخانه از کشورهای اروپایی و آسیایی معتبر با دانش فنی تمام ایرانی خریداری شده است. کیفیت محصولات تولیدی مخازن طبی آبادیس نسبت به سایر رقبای منطقه با اختلاف چشمگیری بالاتر می باشد .

آبادیس با توان بالای تولید دو و نیم میلیون کیسه در سال اول، نه تنها تمام کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه آماده صادرات به کشورهای هم جوار خود می باشد. آبادیس با نگاه پیشرفت در زمینه کنترل عفونت در ایران، جلوگیری از خروج ارز، اشتغال زایی و اقتصاد مقاوتی کار خود را آغاز نموده است و در حال حاضر آماده همکاری با تمامی بیمارستان ها، پزشکان، نخبگان و همه افراد دخیل در حوزه کنترل عفونت می باشد.



کیسه های ساکشن یکبار مصرف چیست؟

کیسه های ساکشن یکبار مصرف آبادیس، نسل جدید مخازنی است که در قدیم به عنوان جمع آوری ضایعات در حین عمل از بدن بیماران ساکشن می شد.

این روش ایمن ترین و پرکاربردترین سیستم ساکشن ضایعات عفونی در مراکز درمانی می باشد. این سیستم با حفظ عفونت در کیسه های خود از انتشار و پراکندگی ضایعات عفونی در بخش های مختلف از طریق بسته بودن و پودر جاذب موجود در کیسه ها جلوگیری به عمل می آورد.

مخازن طبی آبادیس توانسته است با کیفیت بالا و قیمت مناسب از هزینه های اضافی و جلوگیری از مصرف آب و کنترل عفونت بیمارستانی گامی بزرگ در ارتقا نظام سلامت کشور بردارد.

مزایا:

- ◆ راهی موثر در کنترل عفونت های بیمارستانی
- ◆ حذف هزینه های مربوط به مواد ضد عفونی کننده و مصرف آب
- ◆ سهولت در استفاده
- ◆ حذف مصرف آب و مواد ضد عفونی کننده
- ◆ قابلیت امحا
- ◆ کاهش هزینه های مربوط به نیرو های بیمارستانی
- ◆ جلوگیری از انتقال بیماری ها
- ◆ حذف زمان شست و شوی مخازن
- ◆ احترام به کاربران و نیروهای بیمارستانی برای جلوگیری از شست و شوی ضایعات
- ◆ جلوگیری از اخلاص در دستگاه های ساکشن و پرتابل بیمارستان ها



کیسه ۱ لیتری



کیسه ۲ لیتری



کیسه ۳ لیتری



مخزن ۱ لیتری



مخزن ۲ لیتری



مخزن ۳ لیتری



پودر جاذب



گیره T شکل



لوله اتصال




رگلاتور



گیره دیواری



پایه نگهدارنده

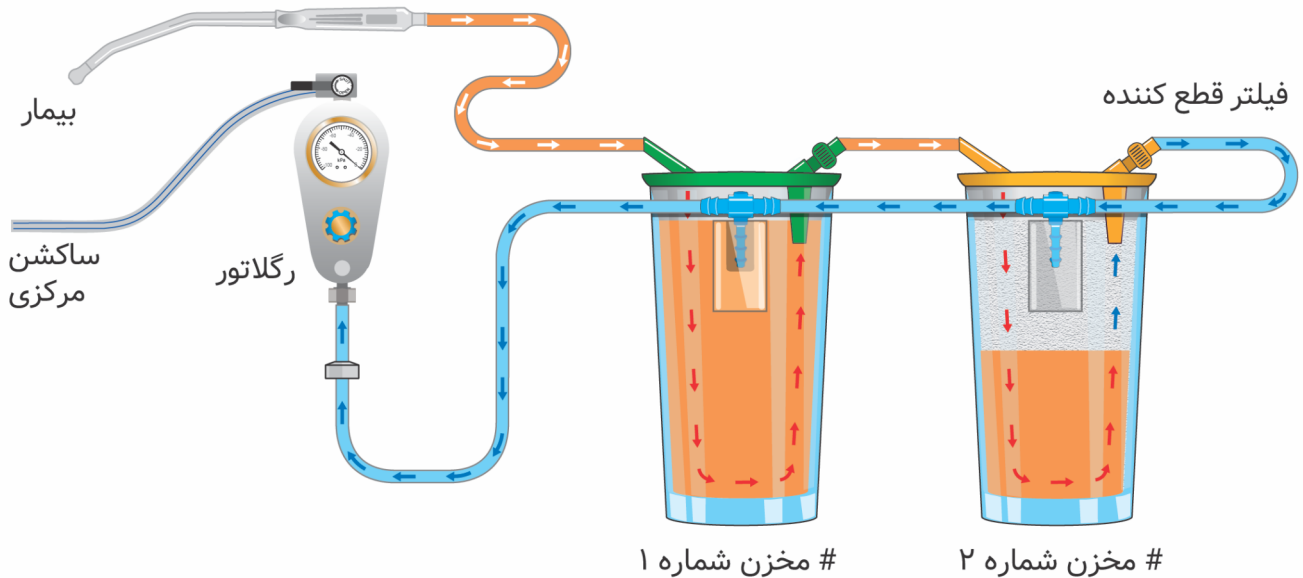

➔ ضایعات به کیسه اولیه وارد می شود و به محض پر شدن کیسه اول، از طریق اتصالات به کیسه های بعدی منتقل می شود و به دلیل داشتن فیلتر قطع کننده مانع از سرریز شدن کیسه ها می شود.

➔ سیستم ساکشن از طریق رگلاتور به بالای مخازن و یا پایه های نگهدارنده متصل شده است که فشار ساکشن به صورت U شکل از مخزن شماره یک به بالای مخزن شماره ۲ متصل می شود. فشار ساکشن از طریق سه راهی T شکل بین مخازن ۱ و ۲ در جریان می باشد که یکی از ویژگی های مخازن طبی آبادیس نسبت فشار مناسب ساکشن می باشد. فیلتر قطع کننده در کیسه مخزن شماره ۲ اطمینان بالایی جهت جلوگیری از سرریز شدن می دهد.



☎ ۰ ۲۱ _ ۲۲۶۷۱۸۴۵
📅 ۰ ۲۱ _ ۲۲۲۱۹۲۳۴
✉ ۱۹۳۵۸۳۹۶۸۳
🌐 www.abadis-med.com
📧 info@abadis-med.com
📍 تهران، قیطریه، بلوار اندرزگو، پلاک ۱۰۴